

WHITE[®] | BEAUTY PROFESSIONAL

Genius Pro

TRATTAMENTO SBIANCANTE PROFESSIONALE ULTRARAPIDO

White Beauty Professional GENIUS PRO è un prodotto di sbiancamento dentale professionale ultrarapido al 6% di perossido di idrogeno che può essere utilizzato dopo una seduta di igiene professionale orale oppure, in alcuni casi, come unico sbiancamento dentario ultrarapido.

White Beauty Professional GENIUS PRO è un gel ultrarapido che non necessita di protezione gengivale e può essere utilizzato con o senza lampada LED.

COME OTTENERE IL GEL BLU PRONTO PER L'USO

- Prima di procedere alla miscelazione indossare i dispositivi di sicurezza (guanti, mascherina e occhiali) e proteggere il paziente.
- Estrarre dal kit la siringa di GENIUS PRO e svitare il tappo e inserire il connettore.
- Svitare il tappo di GENIUS POWDER e collegare la siringa al connettore per collegarla tra di loro.
- Una volta collegate entrambe le siringhe al connettore premere energicamente il pistone della siringa GENIUS PRO travasando completamente il contenuto della siringa di liquido nella siringa GENIUS POWDER.
- Continuare la miscelazione del prodotto premendo 3/4 volte in modo alternato ed energico i pistoni delle siringhe.
- Trasportare il prodotto da una siringa all'altra in modo da ottenere un gel omogeneo di colore blu. Una volta ottenuto un gel omogeneo trasportare tutto il prodotto ottenuto nella sola siringa di GENIUS PRO e rimuovere il connettore.
- Inserire il puntale e comprimere il gel fino a far fuoriuscire l'aria presente all'interno della siringa.

MODALITÀ D'USO

Prima del trattamento si consiglia di effettuare sul paziente una seduta di igiene orale professionale o di verificarne la corretta pulizia dei denti.

Dopo aver inserito un apribocca, effettuare la miscelazione delle due siringhe e applicare il gel appena miscelato sui denti che si vogliono andare a trattare (non è necessario l'utilizzo di una diga gengivale).

Lasciare agire il prodotto per 10 minuti aspirando la saliva del paziente. Rimuovere eventuali residui di prodotto utilizzando l'aspirasaliva rimuovendo il cappuccio superiore per facilitare l'aspirazione. Se il professionista lo ritiene opportuno è possibile effettuare una seconda applicazione.

L'utilizzo della lampada LED è consigliato per accelerare il processo di sbiancamento dentario e il suo uso rimane a discrezione del professionista.

AVVERTENZE:

Contiene perossido d'idrogeno (6%).

Limitare i contatti personali non necessari; evitare contatti con gli occhi; indossare adeguati dispositivi di protezione. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Nel caso in cui permangano stati di irritazione consultare il medico.

Conservare in un'area fresca e ben ventilata, lontano da fonti di calore, scintille, fiamme e luce solare.

PRODOTTO A USO PROFESSIONALE - La siringa è monouso e può essere utilizzata dal professionista su un solo paziente. Da non utilizzare su persone di età inferiore ai 18 anni. L'utilizzo del prodotto è a discrezione del professionista a seguito della valutazione clinica.

MODALITÀ D'USO

METODO DIRETTO DA ESEGUIRE SOLO IN STUDIO

Prima di procedere al trattamento sbiancante dentale, il paziente deve firmare il consenso informato dopo aver appreso tutte le informazioni sulla procedura.



Il professionista in studio effettua l'anamnesi del paziente e ne rileva l'indicazione al trattamento tramite la scala colori o la WBP Card. Assicurarsi che i denti da trattare siano assolutamente puliti e procedere con la presa colore.

In caso di accertata sensibilità dentinale, si consiglia l'applicazione preventiva del trattamento a base di idrossiapatite micronizzata.



Svitare il tappo di GENIUS POWDER e collegare la siringa al connettore.



Continuare la miscelazione del prodotto premendo 3/4 volte in modo alternato ed energico i pistoni delle siringhe.



Inserire il puntale e comprimere il gel blu omogeneo fino a far fuoriuscire l'aria presente all'interno della siringa.




Rimuovere eventuali residui di prodotto utilizzando l'aspirasaliva rimuovendo il tappo superiore per facilitare l'aspirazione.



Prima di procedere alla miscelazione del prodotto gel blu in siringa, indossare guanti, mascherina e occhiali di protezione.

Estrarre dalla confezione la siringa di GENIUS PRO, svitare il tappo e avvitare il connettore.

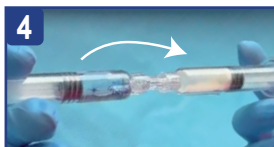

Una volta collegate entrambe le siringhe al connettore premere energicamente il pistone della siringa GENIUS PRO travasando completamente il liquido nella siringa GENIUS POWDER.



Trasportare il prodotto da una siringa all'altra in modo da ottenere un gel omogeneo di colore blu. Una volta ottenuto un gel omogeneo trasportare tutto il prodotto ottenuto nella sola siringa di GENIUS PRO e rimuovere il connettore.



Applicare il contenuto della siringa sui denti che si desidera trattare. Lasciare agire il prodotto aspirando la saliva del paziente. La durata (10/15 minuti a step) e il numero dei trattamenti (max 2) rimane decisione del professionista in base alla valutazione clinica del paziente.

L'utilizzo della lampada è a discrezione del professionista.



Effettuare la presa colore per verificare i risultati ottenuti.

CONSERVAZIONE: Conservare il prodotto a temperatura ambiente, proteggendo la confezione dal calore e dall'esposizione alla luce diretta del sole.

La data di scadenza di riferisce al prodotto perfettamente conservato. Non usare assolutamente dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.

NOTE DI UTILIZZO:

- Per i pazienti che reagiscono con una eccessiva sensibilizzazione dei denti, diminuire il tempo di contatto.
- Controllare lo stato dei denti e delle gengive durante il trattamento.
- Il prodotto, una volta miscelato le due siringhe, può essere usato per un tempo massimo di 60-90 minuti.



ULTRA-FAST PROFESSIONAL WHITENING TREATMENT

White Beauty Professional GENIUS PRO is an ultra-rapid professional whitening system powered by 6% hydrogen peroxide. White Beauty Professional GENIUS PRO can be applied after professional oral hygiene or, in some cases, as a stand-alone ultra-rapid whitening treatment.

White Beauty Professional GENIUS PRO does not require the use of gingival dam and can be used with or without LED light.

HOW TO OBTAIN THE BLUE GEL SOLUTION READY FOR USE

- Before proceeding with mixing, wear safety devices (gloves, mask and glasses) and protect the patient.
- Remove the GENIUS PRO syringe from the kit and unscrew the cap and insert the connector (Luer Lock).
- Unscrew the cap of GENIUS POWDER and connect the syringe to the connector to link them together.
- Once both syringes have been connected to the connector, vigorously press the plunger of the GENIUS PRO syringe, completely pouring the contents of the liquid syringe into the GENIUS POWDER syringe.
- Once the liquid has been poured into the GENIUS POWDER syringe, remove the adhesive seal on the GENIUS PRO syringe. Apply backstops.
- Continue mixing the product by pressing the syringe pistons alternately and vigorously 3/4 times.
- Transport the product from one syringe to another in order to obtain a homogeneous blue gel. Once a homogeneous gel has been obtained, transfer all the product obtained into the GENIUS PRO syringe alone and remove the connector.
- Insert the tip and gently compress the blue gel solution to let the air out of the syringe.

PROCEDURE

Before treatment, it is advisable to carry out a professional oral hygiene session on the patient or to check that their teeth are correctly cleaned.

After inserting a mouth opener, mix the two syringes and apply the freshly mixed gel on the teeth you want to treat (the use of a gum dam is not necessary).

Leave the product to act for 10 minutes, suctioning the patient's saliva. Remove any product residues using the saliva ejector by removing the upper cap to facilitate suction. If the professional deems it appropriate, a second application can be carried out.

The use of the LED lamp is recommended to accelerate the teeth whitening process and its use remains at the discretion of the professional.

WARNINGS:

Contains hydrogen peroxide (6%).

Limit unnecessary personal contact; avoid contact with eyes; wear adequate protective equipment.

In case of contact with eyes, rinse immediately and abundantly with water. If irritation persists, consult your doctor.

Store in a cool, well-ventilated area, away from heat, sparks, flames and sunlight.

PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE - The syringe is disposable and can be used by the professional on a single patient. Not to be used on a person under 18 years of age. The use of the product is at the discretion of the professional following the clinical evaluation.

APPLICATION

METHOD TO BE PERFORMED ONLY AT THE DENTAL OFFICE

Before to start the whitening treatment procedure, the patient should be informed about the complete procedure and has to sign the informed consent.



The professional in the office takes the patient's medical history and notes the indication for treatment via the color scale or the WBP App. Make sure that the teeth to be treated are absolutely clean and proceed with the color setting.

In case of proven dentin sensitivity, the preventive application of the treatment based on micronized hydroxyapatite is recommended.




Before mixing the blue gel product in the syringe, wear gloves, a mask and protective glasses.

Remove the GENIUS PRO syringe from the package, unscrew the cap and insert the connector.



Unscrew the cap of GENIUS POWDER and connect the syringe to the connector.

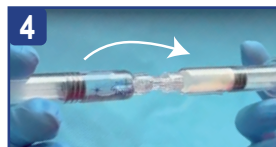

Once both syringes have been connected to the connector, vigorously press the piston of the GENIUS PRO syringe, completely pouring the liquid into the GENIUS POWDER syringe.



Continue mixing the product by pressing the syringe pistons alternately and vigorously 3/4 times.



Transport the product from one syringe to another in order to obtain a homogeneous blue gel. Once a homogeneous gel has been obtained, transfer all the product obtained into the GENIUS PRO syringe alone and remove the connector.



Insert the tip and compress the homogeneous blue gel until the air inside the syringe escapes.



Apply the contents of the syringe to the teeth you wish to treat. Leave the product to act by suctioning the patient's saliva.

The duration (10/15 minutes per step) and the number of treatments (max 2) remains the professional's decision based on the patient's clinical assessment.

The use of the lamp is at the discretion of the professional.



Remove any product residues using the saliva ejector by removing the top cap to facilitate exhalation.



Perform color sampling to check the results obtained.

STORAGE: Store the product at room temperature, protecting the package from heat and exposure to direct sunlight.

The expiry date refers to the perfectly preserved product. Do not use after the expiry date shown on the package.

USAGE NOTES:

- For patients who react with excessive tooth sensitivity, decrease contact time.
- Check the condition of your teeth and gums during treatment.
- Once the two syringes have been mixed, the product can be used for a maximum of 60-90 minutes.



MIROMED GROUP SA
Corso San Gottardo 54A - 6830 Chiasso - SWITZERLAND || www.miromedgroup.ch
MIROMED S.r.l. - Viale De Gasperi 17 - Lainate (MI) ITALY || info@miromed.it