

WHITE[®] | BEAUTY PROFESSIONAL

Genius Laser

TRATTAMENTO SBIANCANTE PROFESSIONALE a base di perossido di idrogeno

White Beauty Professional GENIUS LASER è utilizzato per sbiancare denti affetti da discromie.

Secondo la direttiva Medical Device 93/42/CEE il prodotto si classifica come dispositivo medico di classe I.

Il suo uso è consentito solo in luoghi idonei (studi dentistici) e solo ai medici e specialisti regolarmente abilitati all'esercizio.

COMPOSIZIONE:

Liquid base: Hydrogen peroxide. Solution with 38% dilution in distilled water, co formulant.

Anhydrous products: Gelling agent, E 162, potassium nitrate, co formulant.

CONSIGLI D'USO:

Seguire le modalità d'uso al fine di un corretto utilizzo del prodotto.

La durata delle applicazioni e la relativa idoneità del paziente a essere sottoposto a questa tipologia di trattamento resta sempre alla valutazione del professionista a seguito della valutazione clinica.

INDICAZIONI: Possono essere sbiancati un singolo elemento o più elementi contemporaneamente, affetti da discromie o devitalizzati.

Le discromie possono essere causate da: assunzione di medicinali, fluorosi, macchie legate al cibo, alterazioni dovute all'età.

Il prodotto non deve essere usato in pazienti con allergie accertate nei confronti dei componenti.

Si raccomanda di completare il trattamento con gel sbiancante almeno due settimane prima del posizionamento di nuovi restauri estetici. I restauri esistenti, sui quali il gel non agisce, potrebbero non armonizzarsi con la colorazione più chiara dei denti dopo il trattamento, e potrebbero richiedere una loro sostituzione.

CONTROINDICAZIONI: Non utilizzare il prodotto sui pazienti allergici a un qualsiasi componente del prodotto, in presenza di denti con colletto esposto, in presenza di carie primarie e secondarie non trattate, in presenza di corone e ponti con fessure marginali.

EFFETTI COLLATERALI: Può verificarsi una temporanea sensibilizzazione dei denti; tali sintomi scompaiono di solito al termine del trattamento o con l'interruzione di esso.

AVVERTENZE: White Beauty Professional GENIUS LASER contiene perossido di idrogeno, che è irritante. Si raccomanda l'utilizzo di guanti, mascherine e occhiali protettivi.

Evitare il contatto del gel con cute e mucose; in caso di contatto, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua le parti del corpo interessate.

Nel caso in cui permangano stati di irritazione anche dopo diverse ore consultare il medico. In caso di contatto con occhi consultare immediatamente il medico.

La spatola è monouso e non deve essere utilizzata per pazienti diversi, al fine di evitare possibili contaminazioni crociate.

Evitare contatti del prodotto con sostanze alcaline, con le quali è incompatibile.

Attenzione: prodotto si infiamma a 240°C.

Prima di utilizzare il prodotto, il personale medico deve controllare l'integrità della confezione del prodotto. Lo smaltimento del prodotto usato, deteriorato o scaduto deve essere effettuato secondo le norme circa lo smaltimento dei rifiuti odontoiatrici contenute nel D.Lgs. 05/02/97 e successive modifiche e integrazioni. Il prodotto non può essere usato per scopi diversi da quello per cui è stato progettato.

NOTE: Tenere lontano dalla portata dei bambini. Da utilizzare esclusivamente in cavità orale secondo le specifiche istruzioni per l'uso.

CONSERVAZIONE: Conservare il prodotto a temperatura ambiente, proteggendo la confezione dal calore e dall'esposizione alla luce diretta del sole.

La data di scadenza di riferisce al prodotto perfettamente conservato. Non usare assolutamente dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.

MODALITÀ D'USO

METODO DIRETTO DA ESEGUIRE SOLO IN STUDIO

Prima di procedere al trattamento sbiancante dentale, il paziente deve firmare il consenso informato dopo aver appreso tutte le informazioni sulla procedura.



Il professionista in studio effettua l'anamnesi del paziente e ne rileva l'indicazione al trattamento tramite la scala colori o la WBP Card. Assicurarsi che i denti da trattare siano assolutamente puliti e procedere con la presa colore.

In caso di accertata sensibilità dentale, si consiglia l'applicazione preventiva del trattamento a base di idrossiapatite micronizzata.



Sollevare il labbro tramite l'uso di un apribocca. Proteggere la gengiva applicando la diga liquida White Beauty Professional QUICK MASK BLUE (al termine dell'applicazione fotopolimerizzarla come da istruzioni prodotto).




Prima di procedere alla miscelazione del prodotto gel rosa in siringa, indossare guanti, mascherina e occhiali di protezione.

Estrarre dalla confezione la siringa di GENIUS LASER, svitare il tappo e avvitare il connettore.



Svitare il tappo di GENIUS POWDER e collegare la siringa al connettore.

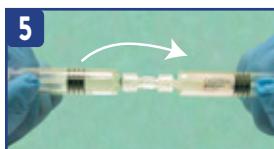

Una volta collegate entrambe le siringhe al connettore premere energicamente il pistone della siringa GENIUS LASER travasando completamente il liquido nella siringa GENIUS POWDER.



Continuare la miscelazione del prodotto premendo 3/4 volte in modo alternato ed energico i pistoni delle siringhe.



Una volta ottenuto un gel omogeneo trasportare tutto il prodotto ottenuto nella sola siringa di GENIUS LASER e rimuovere il connettore.



Inserire il puntale e comprimere il gel rosa omogeneo fino a far fuoriuscire l'aria presente all'interno della siringa.



Applicare il gel rosa sbiancante direttamente sui denti e attivarlo con l'utilizzo del laser dente per dente o ad arcata in base alla tipologia di laser utilizzato. La durata del trattamento dipende dalla tipologia di laser utilizzato.



Aspirare il prodotto ed eventualmente ripetere un secondo step di applicazione (non utilizzare acqua).

La procedura può essere ripetuta fino a due steps (seguendo sempre le indicazioni del professionista e della tipologia di laser utilizzato).



Effettuare la presa colore per verificare i risultati ottenuti. Rimuovere la diga liquida utilizzata per proteggere le gengive.



In caso di sensibilità dentale post trattamento ripetere l'applicazione del trattamento a base di idrossiapatite micronizzata.

NOTE DI UTILIZZO:

- La durata del trattamento e l'eventuale secondo step sono determinati dalla tipologia di laser utilizzato: fare riferimento alle indicazioni date dalla casa produttrice.
- Per i pazienti che reagiscono con una eccessiva sensibilizzazione dei denti, diminuire il tempo di contatto.
- Controllare lo stato dei denti e delle gengive durante il trattamento.
- Il prodotto, una volta miscelato le due siringhe, può essere usato per un tempo massimo di 60-90 minuti.

PROFESSIONAL DENTAL WHITENING TREATMENT based on Hydrogen Peroxide

White Beauty Professional GENIUS 38% is used to whiten teeth with discoloration. According to the Medical Device Directive 93/42/EEC the product is classified as a class I medical device.

Its use is permitted only in suitable places (dental offices) and only to doctors and specialists regularly authorized to practice.

COMPOSITION:

Liquid: Hydrogen peroxide. Solution with 38% dilution in distilled water, co formulant.

Anhydrous products: Gelling agent, E 162, potassium nitrate, co formulant.

ADVICE ON USE:

Follow the instructions for use in order to use the product correctly.

The duration of the applications and the relative suitability of the patient to be subjected to this type of treatment always remains to be assessed by the professional following the clinical evaluation.

INDICATIONS: It can be used for a single tooth or several teeth with discoloration or devitalized at the same time.

The discoloration may be caused by: medicines, fluorosis, food stains and ageing. The product must not be used on patients with verified allergies to the product components. It is recommended to complete the whitening treatment at least two weeks before the placement of any new restorations. Existing restorations, on which the product do not work, may not match the lighter color of the teeth after the whitening treatment and may need to be replaced.

CONTRAINDICATIONS: Do not use the product on patients during pregnancy or when breastfeeding, on children, heavy smokers or heavy drinkers, patients allergic to any of the product components, on teeth with the exposed root, on primary and secondary untreated caries, on crowns and bridges with marginal cracks.

SIDE EFFECTS: There may be a temporary teeth sensitivity; these symptoms usually disappear when the treatment is finished or interrupted.

WARNING: White Beauty Professional GENIUS LASER contains hydrogen peroxide which is an irritant. It is recommended the use of gloves, surgical masks and protective goggles. Avoid the contact of the gel with the skin and mucosa, in case of contact rinse with water the area immediately and thoroughly. Consult your doctor if the irritation persists for several hours. In case of contact with eyes, consult immediately the doctor. Make the complete treatment maximum 2 times per patient in an year.

In case of swallowing significant quantity of whitening gel, drink plenty of water and consult the doctor.

The spatula used for mixing and application is disposable and should not be used for different patients in order to avoid possible cross contamination.

Avoid contact of the product with alkaline substances as they are not compatible.

Warning: the product ignites at 240° C.

Before using the product, the doctor must check the integrity of the packaging. Dispose the used product according to the local and governmental authorities regulations. The product cannot be used for purposes other than that for which it was designed.

NOTE: Keep out of children's reach. The product must be used in oral treatment according with the specific instructions for use.

STORAGE: The product should be kept in room temperature. Avoid direct light exposure and heat. The expiry date refers to the properly stored product. Do not use after the reported date is expired.

APPLICATION

METHOD TO BE PERFORMED ONLY AT THE DENTAL OFFICE

Before to start the whitening treatment procedure, the patient should be informed about the complete procedure and has to sign the informed consent.



The professional in the office takes the patient's medical history and notes the indication for treatment via the color scale or the WBP Card. Make sure that the teeth to be treated are absolutely clean and proceed with the color setting. In case of proven dentinal sensitivity, the preventive application of the treatment based on micronized hydroxyapatite is recommended.




Lift the lip using a mouth opener. Protect the gums using White Beauty Professional QUICK MASK BLUE (after applying light cure as per instructions for use).



Before mixing the pink gel product in the syringe, wear gloves, a mask and protective glasses. Remove the GENIUS LASER syringe from the package, unscrew the cap and insert the connector.



Unscrew the cap of GENIUS POWDER and connect the syringe to the connector.

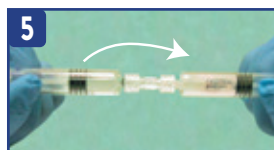

Once both syringes have been connected to the connector, vigorously press the piston of the GENIUS LASER syringe, completely pouring the liquid into the GENIUS POWDER syringe.



Continue mixing the product by pressing the syringe pistons alternately and vigorously 3/4 times.



Once a homogeneous gel has been obtained, transfer all the product obtained into the GENIUS LASER syringe alone and remove the connector.



Insert the tip and compress the homogeneous pink gel until the air inside the syringe escapes.



Apply the pink whitening gel directly to the teeth and activate it using the laser tooth by tooth or arch based on the type of laser used. The duration of the treatment depends on the type of laser used.



Aspirate the product and possibly repeat a second application step (do not use water). **The procedure can be repeated up to two steps** (always following the instructions of the professional and the type of laser used).



Perform color sampling to check the results obtained. Remove the liquid dam used to protect the gums.



In case of sensibility after treatment it is suggested to repeat the application of the treatment with micronized hydroxyapatite.

USAGE NOTES:

- The duration of the treatment and the possible second step are determined by the type of laser used: refer to the instructions given by the manufacturer.
- For the patients who teeth sensibility highly reacts, reduce the contact time.
- Control the status of the teeth and the gingiva during the treatment.
- Once mixed the 2 syringes the product should be used within max. 60-90 minutes.